


Selección del tamaño de tu embudo Hands Free™




Acerca de los tamaños de los embudos Hands Free™ de Medela

Asegúrate de utilizar un embudo del tamaño adecuado. Es un componente esencial para una extracción efectiva y ayuda a optimizar el flujo de leche.


Esta guía es un punto de partida para ayudarte a seleccionar tu tamaño ideal dependiendo del diámetro de tu pezón.

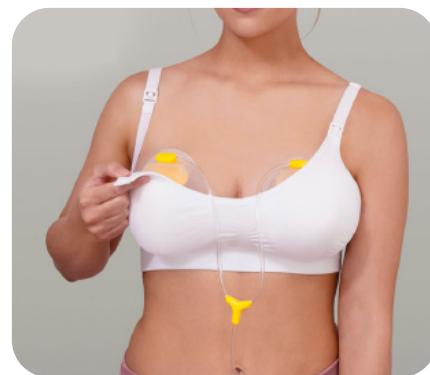

1. Mide tu pezón para elegir la talla correcta de embudo

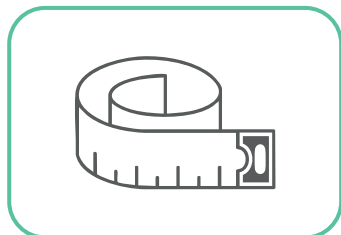

Para medir la talla de tu pezón, usa una regla o cinta métrica.

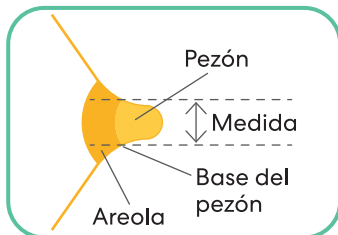


Calcula el diámetro de tu pezón en la base (a lo largo del centro) en milímetros (mm). Recuerda no incluir la areola.





Puedes determinar la talla de tu embudo Medela añadiendo 4 mm a tu medida obtenida. Ejemplo: Si el diámetro de tu pezón es de 16 mm, la talla recomendada de embudo Medela es de 21 mm. Esto es solo un punto de referencia; debes volver a evaluar la talla después de unos minutos de extracción.


2. Coloca las copas correctamente

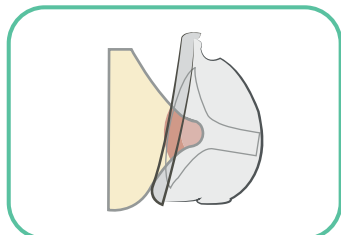

Coloca la copa sobre el pecho, de abajo hacia arriba, para que puedas ver la posición del pezón en el embudo.

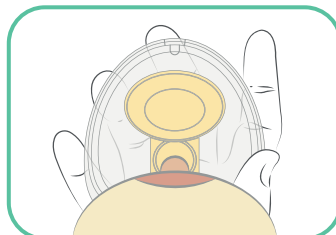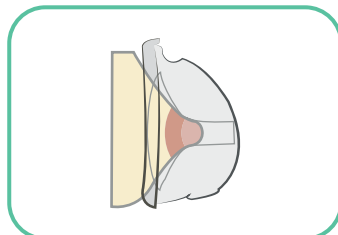

Asegúrate de que el pezón esté centrado en el túnel del embudo.

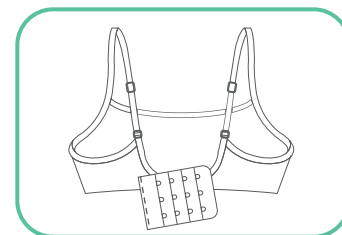


Se recomienda usar un sostén un poco más grande (para minimizar la compresión del pecho); puedes lograrlo con un extensor de sostén.


Comprueba el tamaño de tu embudo

Verifica durante el proceso de extracción


1. Centra el pezón y sujeta el embudo contra tu seno con suavidad.
2. Enciende el motor de tu extractor y ajusta el Maximun Confort Vacuum™ (vacío máximo tolerable) para alcanzar un nivel óptimo de succión.
3. Toma las siguientes imágenes como referencia durante la extracción en la fase de extracción (tras la fase de estimulación).

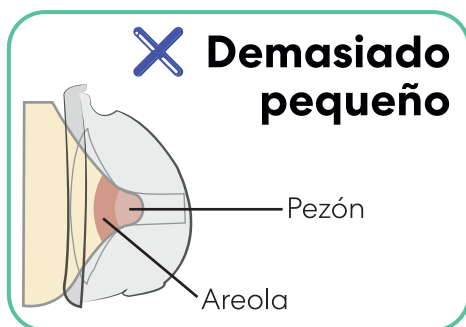

El pezón roza los laterales del túnel. Prueba un tamaño más grande.

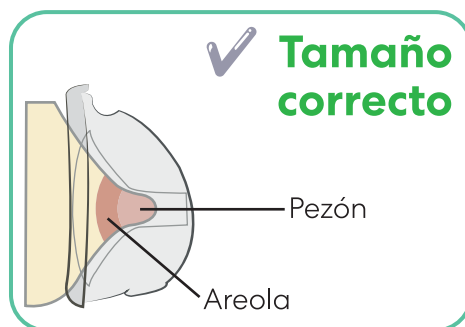

El pezón está centrado y se mueve libremente.

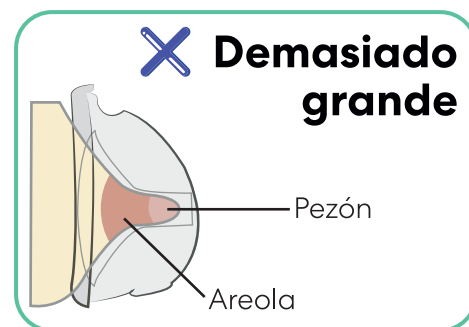

El pezón y un trozo de la areola entra en el túnel. Prueba un tamaño más pequeño.

Razones para probar otro tamaño

- ¿Tu pezón roza los lados del túnel hasta el punto de causar molestias?
- ¿Has observado que una parte de la areola entra en el túnel?
- ¿Observas alguna rojez?
- ¿Tu pezón o areola se están volviendo de color blanco?
- ¿Notas que queda leche por extraer tras la extracción?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «Sí», es recomendable que pruebes un nuevo tamaño siguiendo las instrucciones de medición anteriores.

Si sigues sin estar segura de haber seleccionado el tamaño correcto, dirígete a una consultora de lactancia o a un especialista en salud.

¿Sabías qué...?

- Es posible que necesites un embudo de diferente tamaño para cada seno.
- El tamaño de tu embudo dependerá del tejido de la mama y de la elasticidad de la piel.
- El tamaño de tu embudo podría variar en el tiempo en el que extraigas leche.
- Al aplicar presión de vacío, el tamaño de tu seno podría variar.
- Un exceso de presión en el embudo podría bloquear los conductos galactóforos.